



# オーハウス エントリー電子天びん PAシリーズ

オーハウス PAシリーズは、基本的かつ需要の高い計量モードを搭載しながら優れたコストパフォーマンスを実現した電子天びんです。また分銅内蔵型モデルを展開し、日常の校正作業を大きくサポートいたします。シンプル操作で使い易く、天びん初心者から上級者まで幅広くお使いいただけるエントリーモデルです。



▲ PA214CJP



▲ PA4102JP

※操作部は日本語表記となっています。



▲ ワンタッチ着脱式風防



▲ 調整脚

## 主な特徴：

- ・簡単操作の校正機構を搭載した**分銅内蔵型**モデル(型式:PA\*\*\*CJP)と、外部分銅校正対応の標準型モデル(型式:PA\*\*\*JP)の2ラインアップ
- ・ニーズの多い計量モード(**重量・個数・%**)を搭載しつつ、**リーズナブル**な価格設定
- ・最小表示0.1mg～1mg(0.001g)モデルには、**全面ワンタッチ着脱式ガラス製風防**を標準装備し、簡単にクリーニング可能
- ・**RS232C出力標準装備**
- ・**表示部保護カバー**標準付属

## PAシリーズ：仕様一覧

標準型：型式	PA64JP	PA114JP	PA214JP	PA213JP	PA413JP	PA2102JP	PA4102JP
品番	80253232	80253220	80253226	80253224	80253230	80253222	80253228
ひょう量	65g	110g	210g		410g	2100g	4100g
最小表示	0.1mg		0.001g		0.01g		
繰返し性(標準偏差)	0.1mg		0.001g		0.01g		
直線性	±0.2mg		±0.002g		±0.02g		
風袋差し引き範囲	0~65g	0~110g	0~210g		0~410g	0~2100g	0~4100g
安定時間(代表値)	3秒						
計量モード	重量・個数・%・床下計量						
表示部 / 通信出力	液晶表示 / RS232C(標準装備)						
計量皿寸法(mm)・材質	Φ90・ステンレス			Φ120・ステンレス		Φ180・ステンレス	
風防内有効スペース(mm)	150(W)×160(D)×180(H)					—	
本体寸法(mm)	196(W)×320(D)×287(H)					196(W)×320(D)×92(H)	
本体重量	4.6kg(標準モデル)、5.2kg(分銅内蔵型モデル)					4.5kg(標準モデル)、5.1kg(分銅内蔵型モデル)	
電源	ACアダプタ(標準付属)						
分銅内蔵型モデル：型式	PA64CJP	PA114CJP	PA214CJP	PA213CJP	PA413CJP	PA2102CJP	PA4102CJP
品番	80253233	80253221	80253227	80253225	80253231	80253223	80253229

## PAシリーズ：アクセサリ

品番	品名 / 型式
83020221	PA用表示部保護カバー
30045641	プリンタ / SF40A (RSケーブル付属)
12122603	RS232Cケーブル(プリンタ用)
64088427	USB-RS232接続ケーブル
90001765	データ取り込みソフト / Win-OH




▲ プリンタ / SF40A




▲ RS232C出力


## 外形寸法図

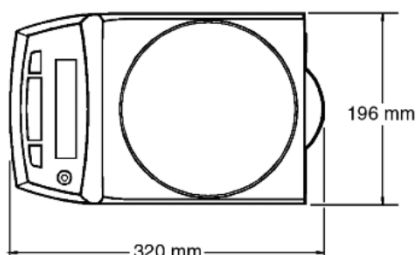

▲ 全モデル

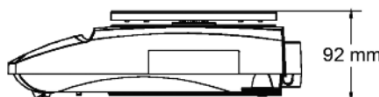

▲ 風防無しのモデル

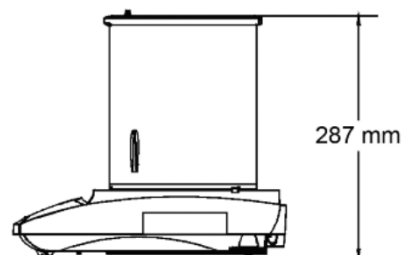

▲ 風防付きのモデル



<http://www.ohaus.com>

オーハウス コーポレーション

カスタマーサポートセンター TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525  
Email:japansales@ohaus.com

■東京本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル(トラートリート)内